

ND COVID-19 왜 앤디포스의 IgG/IgM 신속 진단키트인가?

분자 진단키트는 코로나 감염 유전자 여부를 확인하지만, SARS-CoV-2에 대한 환자의 면역반응 여부는 파악하지 못합니다.

앤디포스의 ND COVID-19 IgG/IgM 신속 진단키트는 소량의 혈액을 활용하여 SARS-CoV-2 면역반응 여부를 확인하는 현장형(Point-of-Care Testing : POCT)진단키트입니다. 앤디포스가 개발한 IgG/IgM 진단키트는 확진자 및 무증상 감염자, 완치자가 SARS-CoV-2 항체의 생성여부를 확인하는 신속 진단키트입니다.

ND COVID-19 IgG/IgM 신속 진단 테스트

ND COVID-19 IgG/IgM 응급 진단 테스트는 사람의 혈액 (전혈, 혈청, 혈장, 모세혈) SARS-CoV-2 IgG/IgM 항체의 정상적인 파악을 위한 체외 진단용 의료기기입니다.

특장점

- 15분 이내 결과 확인
- 편리한 사용
- 소량의 샘플 사용 (10 µL)
- 신뢰도 높은 검사결과


ISO 13485: 2016



ND COVID-19 IgG/IgM 신속 진단 테스트


■ 사양

- 제품명 : ND COVID-19 IgG/IgM 신속 진단 테스트
- 검체 : 전체 혈액(손끝에서 채취), 혈청이나 혈장
- 검체량 : 10 μ L
- 진단 시간 : 15 분
- 사용 온도 : 18-25 $^{\circ}$ C
- 보관 온도 : 1-30 $^{\circ}$ C
- 유통기한(봉인 상태) : 6 개월

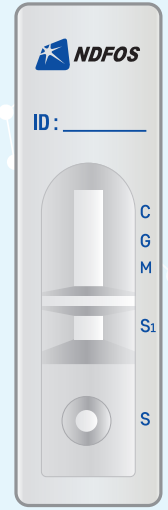


Cat No: ND-nCoV-R01


■ 진단절차

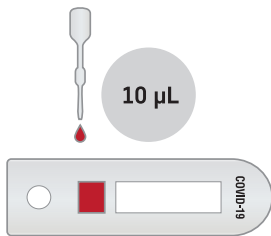

1. Add 10 μ L specimen

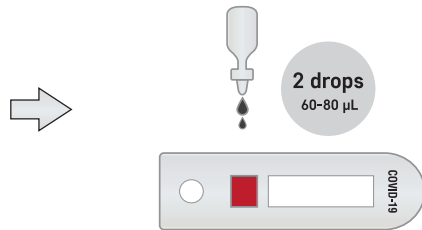


2. Add 2 drops of buffer

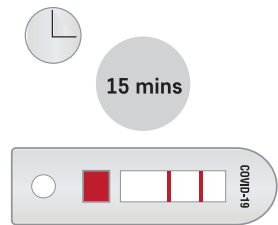


3. Read the test result


■ 결과분석

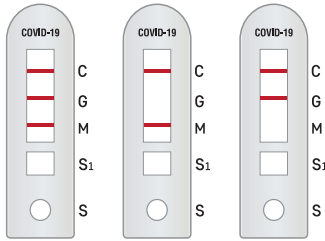

양성

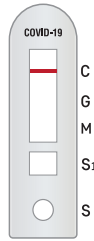

음성

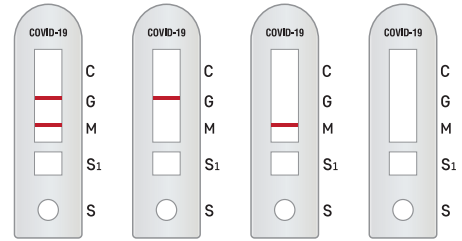

무효

We help you care!

앤디포스는 모든 문의 사항에 대해 전화, E-메일, 직접 고객 응대 서비스를 하고 있습니다.



www.ndfos.com
E-mail : whtndus1231@ndfos.com

HEAD OFFICE : [07572]서울특별시 강서구 화곡로 372 7층 (ND TOWER) Tel : +82 2 782 7790~1 Fax : +82 2 786 3480
NDFOS BIO OFFICE : [06062]서울특별시 강남구 도산대로 458번지 한국빌딩 5층 Tel : +82 2 6203 0733 Fax : +82 303 3130 3480